

AirView® Bowie Dick

Pakiet testowy oraz arkusz A4

Test BowieDick w formie arkusza A4 lub gotowego pakietu przeznaczony jest do codziennej oceny sprawności sterylizatorów parowych z wstępną próżnią, które wykonują cykle podciśnieniowe i nadciśnieniowe.

Test wykrywa m.in. spadki temperatury, obecność powietrza w komorze sterylizatora, nieodpowiednią penetrację pary i złą pracę pompy próżniowej.

Zestaw BDS030 składa się z arkusza wczesnego ostrzegania wykrywającego już pierwsze objawy nieprawidłowej pracy sterylizatora, który umieszczono pomiędzy arkuszami papieru oraz specjalną pianką PP, celem stworzenia maksymalnie krytycznych warunków dla penetracji pary. Całość zestawu znajduje się w sztywnym opakowaniu kartonowym jednorazowego użytku. Na zewnątrz opakowania umieszczono dodatkowo wskaźnik kontrolny.

Zestaw BDS050 składa się z arkusza formatu A4 pokrytego substancją wskaźnikową, który należy umieścić wewnątrz pakietu wykonanego z suchych ręczników o wymiarach 300 x 225 x 280 mm.

W obu testach, po prawidłowo przeprowadzonym cyklu kontrolnym, wskaźnik zmienia zabarwienie na kolor czarny.

Niewielkie rozmiary zestawu BDS 030 pozwalają na zastosowanie testu w każdym sterylizatorze parowym z programem Bowie Dicka.

Badania wykonane przez niezależne jednostki opiniujące potwierdzają, iż test Air View poprzez zastosowanie m.in. opakowania kartonowego oraz specjalnej pianki PP jest jednym z najbardziej krytycznych testów w swojej klasie.

■ sposób użycia i odczyt wyników

Cykl kontrolny należy przeprowadzić po wstępnym nagraniu autoklawu. Test Bowie Dicka przeprowadza się w temp. 134°C w czasie 3,5-4 min. w pustej komorze sterylizatora. Dla testu BDS050 należy przygotować specjalny zestaw wsadowy zgodnie z EN275. Po prawidłowo przeprowadzonym cyklu kontrolnym w programie Bowie Dick dostępnym w sterylizatorze, arkusz testowy zmienia kolor zabarwienia na czarny.

■ obszary zastosowań


sterylizatory parowe wszystkich typów



BDS030



BDS050

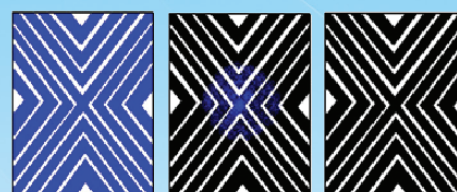

przed procesem

wynik negatywny

wynik pozytywny

■ normy

ANSI/AMII ST-66:2002 Sterylizacja parowa i zapewnienie sterylności urządzeń medycznych,
PN EN 867-4 klasa B,
ISO 11140 klasa 2

■ przechowywanie i okres przydatności

Należy zachować niski poziom wilgotności w pomieszczeniu oraz temperaturę poniżej 27°C oraz odpowiednią rotację zapasów. Okres przydatności do użycia umieszczono na opakowaniu.

■ numer katalogowy i opakowanie

BDS030
30 pakietów

BDS050
50 arkuszy

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań

tel.: Dział Obsługi Klienta: 61 66 43 813, sekretariat: 61 66 43 850, fax 61 66 43 819

e-mail: biuro@informer-med.com.pl