

Wrap tape

Taśmy sterylizacyjne samoprzylepne taśmy zabezpieczające

opis produktu

Taśmy samoprzylepne ze specjalnego, supermocnego krepowanego papieru z naniesioną warstwą kleju, gwarantującego ich dobre przyleganie do różnych powierzchni m. in. papieru, włókny, folii lub metalu, służą do zabezpieczenia sterylizowanych pakietów przed niekontrolowanym otwarciem. Dostępne są różne rodzaje taśm: do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu i gorącym powietrzem. Substancje chemiczne zawarte we wskaźnikach nie zawierają szkodliwych metali ciężkich i lateksu. Wskaźniki chemiczne na taśmach są testami Typu 1 wg ISO 11140- sygnalizują jedynie fakt poddania procesowi sterylizacji, jednak nie wykazują jego skuteczności. Taśmy zachowują doskonałe parametry fizyczne i nie odklejają się podczas procesu; można je łatwo odkleić od wysterylizowanego pakietu bez ryzyka jego uszkodzenia.

sposób użycia i odczyt wyników

Pakiet zawinięty papierem krepowanym, włókniną lub SMSem należy okleić taśmą na całej jego długości i szerokości, w taki sposób, aby końcówki taśmy zachodziły na siebie na odcinku minimum 10cm.

Po przeprowadzonym procesie sterylizacji powinna nastąpić zmiana barwy wskaźnika na taśmie:

Para wodna- z zielonego na brązowy

Tlenek etylenu- z brązowego na zielony

dane techniczne


Grubość: 0,178mm

Siła sklejania: 38N/ 100mm

Odporność na odrywanie: 385N/ 100mm

obszary zastosowań

Sterylizatory parowe, gazowe różnych typów.

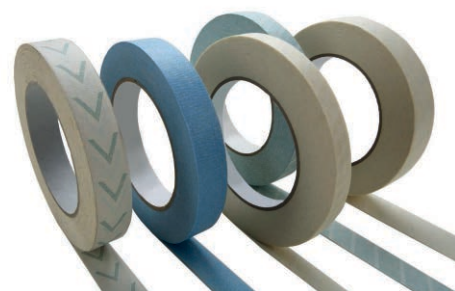

CROSSTEX
A CANTEL MEDICAL COMPANY

SPS
medical

normy	przechowywanie i okres przydatności	numer katalogowy i opakowanie
ISO 11140-1, Typ 1	Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 30°C. Należy zachowywać odpowiednią rotację zapasów. Okres przydatności umieszczony na etykiecie produktu.	31001950VE - para wodna; 1,9cm x 50m 31002550VE - para wodna; 2,5cm x 50m 1096 - bez wskaźnika, niebieska, 1,9cm x 50m 1097N - bez wskaźnika, niebieska, 2,5cm x 50m

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu