


Bezpieczny system do torako-i paracentezy Turkel™

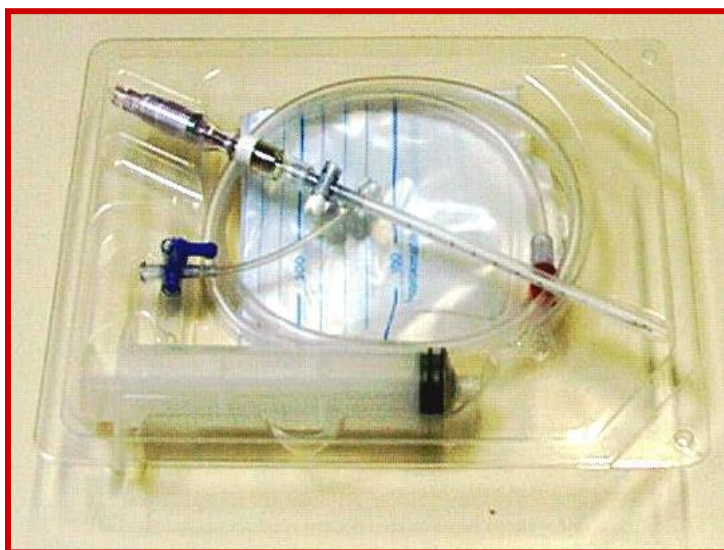

Kod Produktu	Opis	Ilość sztuk w opakowaniu
8888566067	Bezpieczny system do torako-i paracentezy Turkel™, tacka	10
8888566068	Worek 2L do bezpiecznego systemu do torako-i paracentezy Turkel™	10

Opis produktu

Bezpieczny system do torako-i paracentezy Turkel™ zawiera tępą sprężystą wewnętrzną kaniulę umieszczoną w ostro zakończonej igle. Gdy igła i tępa kaniula wnikają w ścianę klatki piersiowej lub obszar brzucha, tępa kaniula cofa się w trzon igły. Kiedy igła napotyka niski opór, taki jak obszar wysięku opłucnej w obrębie przestrzeni opłucnowej, sprężysta kaniula automatycznie wysuwa się poza fazę, chroniąc leżącą pod nią tkankę przed dalszą, niezamierzoną penetracją. Kolorowy wskaźnik umieszczony w płaszczyźnie igły zapewnia bezpośrednią wizualizację tępej kaniuli podczas wprowadzania igły. Zawór jednokierunkowy w obudowie igły umożliwia wydostawanie się powietrza i płynu z igły, ale zapobiega przedostawaniu się powietrza atmosferycznego do wolnej wnęki. Bliższy koniec zespołu cewnika zawiera zawór kulowy i wewnętrzny zawór odcinający, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza do cewnika po usunięciu zespołu igły.

