

LECZENIE ŻYWIENIOWE
Żywnie dojelitowe



System bezpiecznego
żywienia dojelitowego
dla pacjentów
dorosłych i dzieci



Value Life

Czym jest norma ISO 80369?

Jest to międzynarodowy standard dotyczący łączników z otworami o małej średnicy do płynów i gazów stosowanych w medycynie ogólnej.

Cele wprowadzenia nowego standardu jest uniemożliwienie błędnych połączeń między akcesoriami i urządzeniami przeznaczonymi do innych zastosowań (np. podłączenia zgłębnika dojelitowego do linii dostępu żylnego).

ISO 80369 składa się z następujących części:

- Część 1: Wymagania ogólne
- Część 2: Łączniki do zastosowań w układach oddechowych
- **Część 3: Łączniki do zastosowań dojelitowych**
- Część 4: Łączniki do zastosowań w układach moczowych
- Część 5: Łączniki do stosowania w mankietach pneumatycznych
- Część 6: Łączniki do zastosowań w blokadach centralnych
- Część 7: Łączniki do zastosowań dożylnych (Luer)
- Część 20: Metody testowania



Czego dotyczy ISO 80369-3?


ISO 80369-3 (Część 3) jest poświęcona łącznikom do zastosowań dojelitowych. Znajdują się w niej opisy, ilustracje i wymiary łącznika do zastosowań dojelitowych. W nowym, obowiązującym standardzie do wszystkich zastosowań dojelitowych, zarówno u pacjentów dorosłych jak i dzieci jest stosowany tylko jeden łącznik.

Co oznacza nazwa ENFit?

Przyjęto, że w celu uproszczenia komunikacji, łączniki stosowane w żywieniu dojelitowym zgodne z normą ISO 80369-3 będą nazywane łącznikami typu **ENFit**.

Co oznacza Nutrifit?

Nutrifit to nazwa wspólna linii produktów Vygon z łącznikami typu ENFit.

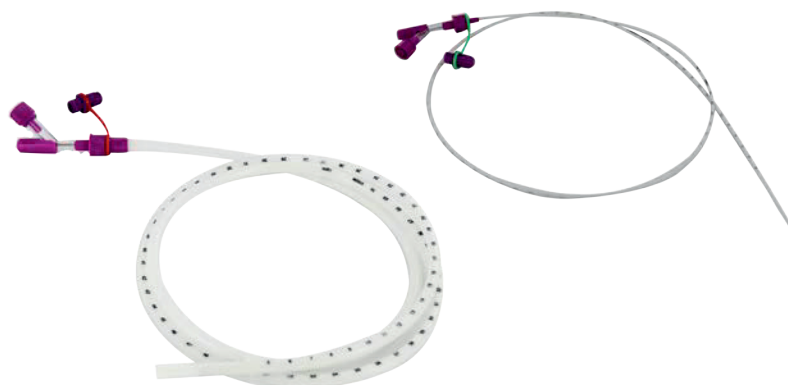

Czy **Nutrifit** spełnia wymagania ISO 80369-3?

Tak, linia Nutrifit jest w pełni zgodna z wymogami normy ISO 80369-3.

● Jaka jest opinia specjalistów Vygon o systemie ENFit?

Vygon poleca łączniki ENFit do zastosowań u pacjentów dorosłych oraz u dzieci. Ryzyko podania zbyt małej lub zbyt dużej objętości pokarmu jest szczególnie wysokie w przypadku żywienia dojelitowego noworodków.




● Jakie są zalecenia Vygon w przypadku noworodków?

Do zastosowań na oddziałach neonatologii Vygon poleca system Nutrisafe2. Jest to system bezpiecznego żywienia dojelitowego obecny na rynku od 10 lat. Podstawowe zalety systemu Nutrisafe2® to bezpieczeństwo, niewielkie rozmiary, dokładność i zgodność z wymaganiami ISO 80369-1.



● **Nutrifit®**: system bezpiecznego żywienia dojelitowego dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych

Kompletna oferta produktów Nutrifit®

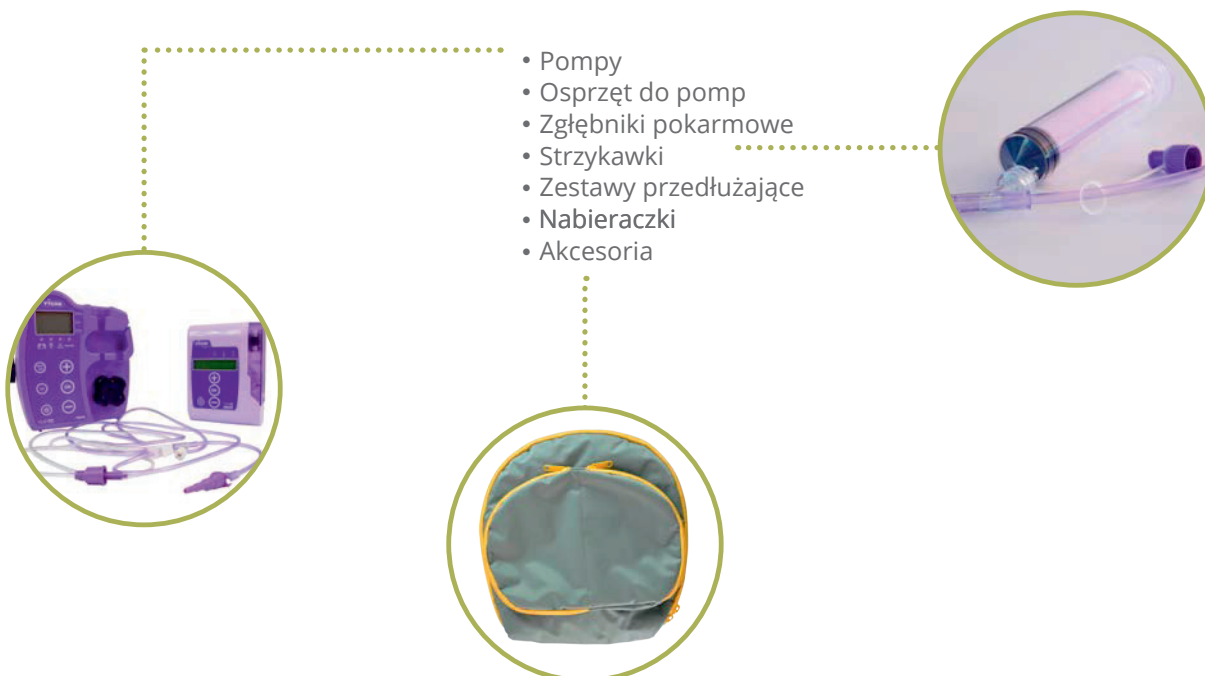



Nutrifit®: zgłębniki pokarmowe

Nutrifit®

• Zgłębnik z medycznego PVC

Długość	Rozmiar					
	8 Fr	10 Fr	12 Fr	14 Fr	16 Fr	18 Fr
90 cm	366.087	366.107	366.127	366.147	366.167	366.187
125 cm	362.087	362.107	362.127	362.147	362.167	362.187

Bez mandrynu

• Poliuretanowy zgłębnik bez mandrynu

Długość	Rozmiar					
	8 Fr	10 Fr	12 Fr	14 Fr	16 Fr	18 Fr
40 cm	1364.087					
50 cm	1361.087	1361.107				
90 cm	1366.087	1366.107	1366.127			
125 cm	1362.087	1362.107	1362.127	1362.147	1362.167	1362.187

• Poliuretanowy zgłębnik z mandrynem

Długość	Rozmiar					
	8 Fr	10 Fr	12 Fr	14 Fr	16 Fr	18 Fr
90 cm z zamk. ujściem	1366.0871	1366.1071	1366.1271	1366.1471	1366.1671	1366.1871
90 cm z otw. ujściem	1366.0872	1366.1072	1366.1272			
125 cm z zamk. ujściem	1362.0871	1362.1071	1362.1271	1362.1471	1362.1671	1362.1871
125 cm z otw. ujściem	1362.0872	1362.1072	1362.1272			
125 cm z obciążoną końcówką	1362.0874	1362.1074	1362.1274	1362.1474	1362.1674	1362.1874

Bez mandrynu

• Zgłębniki silikonowe

Długość	Rozmiar					
	8 Fr	10 Fr	12 Fr	14 Fr	16 Fr	18 Fr
50cm	2331.087					
125cm	2332.087	2332.107	2332.127	2332.147	2332.167	2332.187

Bez mandrynu

• Sonda żołądkowa z podwójnym ujściem z medycznego PVC

Długość	Rozmiar					
	8 Fr	10 Fr	12 Fr	14 Fr	16 Fr	18 Fr
60cm	340.087					
90cm		340.107	340.127	340.147		
120cm					340.167	340.187

Bez mandrynu

Nutri**fit**[®]: strzykawkki

Nutri**fit**[®]

• Strzykawkki przezroczyste

Nr katalogowy	Objętość
1015.017	1 ml
1015.027	2,5 ml
1015.057	5 ml
1015.107	10 ml
1015.207	20 ml
1015.607	60 ml



Nutri**fit**[®]: akcesoria

• Przedłużki

Długość	Standardowa średnica (1,5 mm)
100 cm	368.107
150 cm	368.157

• Przedłużki z zaciskami

Długość	Standardowa średnica (1,5 mm)
100cm	368.1071
150cm	368.1571

• Nabieraczki

Długość	B. mały otwór Ø 1,2 - 2,0 mm
5 cm	817.057
15 cm	817.157

• Inne akcesoria

Produkt	Nr katalogowy
Łącznik Y	368.47
Koreczek żeński	829.07
Kranik trójdrożny	5802.07



Szczegółowe informacje można uzyskać kierując zapytanie na adres: questions@vygon.com

Niniejsza ulotka ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

VYGON, Polska Sp z o.o.
ul. Francuska 39/6
03-905 Warszawa
tel./fax.: (22) 617-26-97, (22) 617-18-54

