

OPIS WYROBU

Nazwa: BASEN SANITARNY (basen, pokrywa)

Symbol: BS

Materiał: polipropylen

Kolor: biały, **niebieski (nowość)**

Waga: 600g

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym (karton): 5 sztuk

Wymiary opakowania zbiorczego: 54 cm x 51 cm x 29,5 cm

Dezynfekcja i sterylizacja: wyrób można sterylizować w atmosferze suchego powietrza do temperatury 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Można go myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami.


Wyrób przeznaczony do stosowania w jednostkach leczniczych i w warunkach domowych do obsługi ludzi obłożnie chorych, w celu łagodzenia skutków urazów i przebiegu chorób. Wyrób służy do oddawania kału i moczu.

W przypadku stosowania wyrobu przez osoby starsze i/ lub unieruchomione wymagana jest pomoc innych osób.

Uwaga !

- ✧ nie używać pękniętego wyrobu,
- ✧ stosować i przechowywać w temperaturze pokojowej,
- ✧ nie podgrzewać otwartym ogniem,
- ✧ myć popularnymi środkami myjącymi nie zawierającymi substancji ściernych,
- ✧ dezynfekcję można przeprowadzać jednym ze środków przeznaczonych i stosowanych w placówkach służby zdrowia służących do dezynfekcji tego typu wyrobów

Wyrób posiada Deklarację Zgodności z wymaganiami Dyrektywy 93/42. Przeprowadzono procedurę nadania mu znaku CE, oraz został wpisany do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

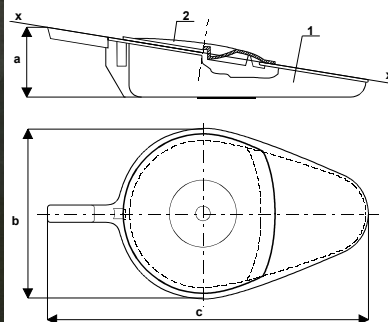

a= 120,5 mm (wysokość), b= 291,5 mm(szerokość), c= 547,5 mm (długość)

OPIS WYROBU

Nazwa: BASEN PŁASKI 2L

Symbol: BP (basen - podstawa)

Symbol: BPK (basen, pokrywa)

Zastosowanie: basen oraz podstawa basenu jednorazowego płaskiego 2L

Materiał: polipropylen


Kolor: zielony, niebieski, pomarańczowy, biały

Waga: 520g

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym (karton): 10, 15 lub 20 sztuk

Dezynfekcja i sterylizacja: wyrób można sterylizować w atmosferze suchego powietrza do temperatury 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Można go myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami.

Wyrób posiada Deklarację Zgodności z wymaganiami Dyrektywy 93/42. Przeprowadzono procedurę nadania mu znaku CE, oraz został wpisany do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

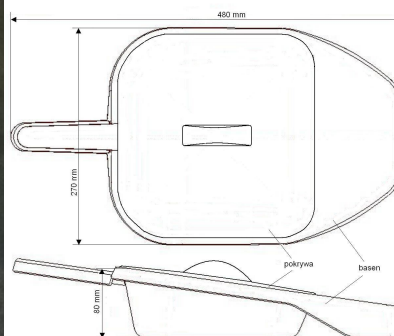

480mm długość; 270mm szerokość ; 80mm wysokość



OPIS WYROBU

Nazwa: KACZKA SANITARNA MĘSKA poj. 1000 ml (z zatyczką)

KACZKA SANITARNA DAMSKA poj. 1000 ml

Symbol: KM, KD

Materiał: polietylen

Kolor: naturalny

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym (karton): 10, 18 sztuk


Wymiary opakowania zbiorczego: 46 cm x 31 cm x 25 cm

Dezynfekcja i sterylizacja: wyroby można sterylizować w atmosferze suchego powietrza do temperatury 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126 °C. Można je myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami.

Uwaga !

- nie używać pękniętego wyrobu,
- stosować i przechowywać w temperaturze pokojowej,
- nie podgrzewać otwartym ogniem,
- myć popularnymi środkami myjącymi niezawierającymi substancji ściernych,
- dezynfekcję można przeprowadzać jednym ze środków przeznaczonych i stosowanych w placówkach służby zdrowia służących do dezynfekcji tego typu wyrobów,
- wyrób może być poddawany sterylizacji termicznej w atmosferze suchego powietrza o temp. 130 0 C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126 0 C

Wyroby posiada Deklarację Zgodności z wymaganiami Dyrektywy 93/42. Przeprowadzono procedurę nadania im znaku CE, oraz zostały wpisane do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

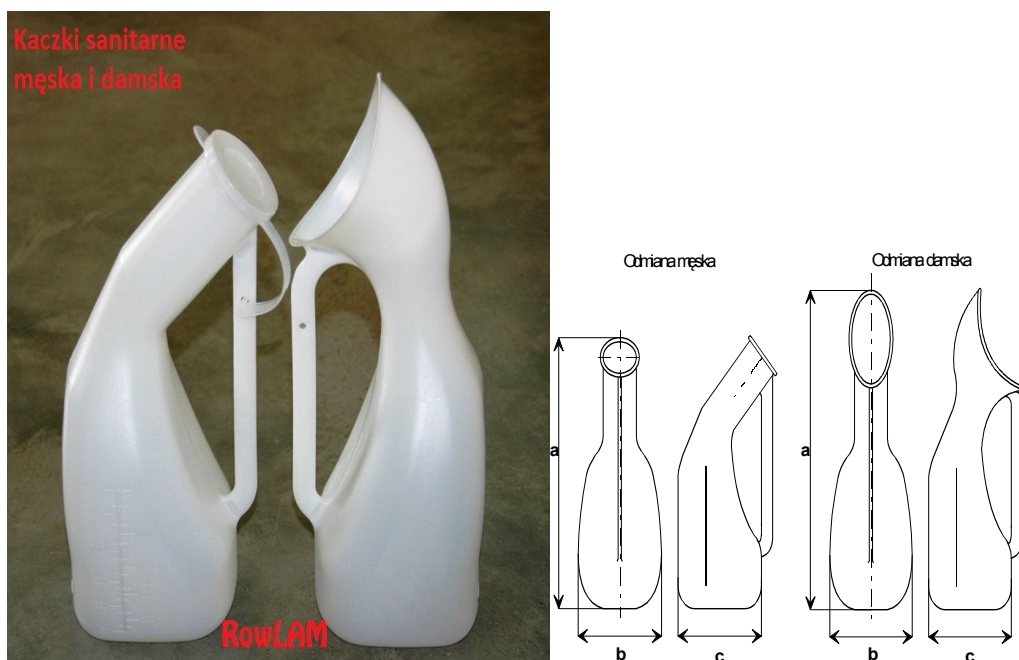

odmiana męska - **a**= 280 mm, **b**=120 mm, **c**= 113 mm

odmiana damska - **a**= 315 mm, **b**=120 mm, **c**= 113 mm

OPIS WYROBU

Nazwa: MISKA NERKOWATA poj. 300 ml (20 cm - wewnątrz)

MISKA NERKOWATA poj. 700 ml (28 cm - wewnątrz)

Symbol: NM, ND

Materiał: polipropylen

Kolor: biały

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym (karton): 20 sztuk (poj. 300 ml) i 15 sztuk (poj. 700 ml)


Wymiary opakowania zbiorczego: 21 cm x 12 cm x 28 cm- (poj. 300 ml)

30 cm x 16 cm x 28 cm- (poj. 700 ml)

Uwaga!

- ✧ nie używać pękniętego wyrobu,
- ✧ stosować i przechowywać w temperaturze pokojowej,
- ✧ nie podgrzewać otwartym ogniem,
- ✧ myć popularnymi środkami myjącymi niezawierającymi substancji ściernych,
- ✧ dezynfekcję można przeprowadzać jednym ze środków przeznaczonych i stosowanych w placówkach służby zdrowia służących do dezynfekcji tego typu wyrobów,
- ✧ wyrób może być poddawany sterylizacji termicznej w atmosferze suchego powietrza do temp. 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126 °C

Wyroby posiadają Deklarację Zgodności z wymaganiami Dyrektywy 93/42. Przeprowadzono procedurę nadania im znaku CE, oraz zostały wpisane do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

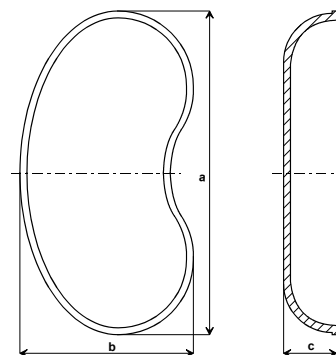

miska o poj. 300 ml - **a**=205 mm, **b**=114 mm, **c**=38,5 mm
(zgodnie z rysunkiem: zewnętrzne wymiary produktu)

miska o poj. 700 ml - **a**=282 mm, **b**=146,5 mm, **c**=45 mm
(zgodnie z rysunkiem : zewnętrzne wymiary produktu)

OPIS WYROBU

Nazwa: KUBEK-POJNIK poj. 200 ml

Symbol: KP

Materiał: polipropylen

Kolor: naturalny tworzywa

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym (karton): 15 sztuk

Wymiary opakowania zbiorczego: 35 cm x 21,5 cm x 13,5 cm

Wyrób przeznaczony do stosowania w jednostkach leczniczych i w warunkach domowych do obsługi ludzi obłożnie chorych, w celu łagodzenia skutków urazów i przebiegu chorób. „KUBEK – Pojnik” wyposażony jest w dwie przykrywki umożliwiające podawanie chorym posiłków w pozycji leżącej.


Przykrywkę z małym otworem należy używać do

picia płynów; przykrywkę o dużym otworze należy stosować do spożywania pokarmów półpłynnych (papek). W przypadku stosowania wyrobu przez osoby starsze lub unieruchomione wymagana jest pomoc osób trzecich.

Uwaga !

- nie podawać w kubku zbyt gorących posiłków,
- nie używać pękniętego wyrobu,
- stosować i przechowywać w temperaturze pokojowej,
- myć popularnymi środkami myjącymi niezawierającymi substancji ściernych,
- aby uniknąć wylania zawartości należy mocno zacisnąć wieczko na kubku,
- nie podgrzewać otwartym ogniem.

Wyroby posiadają Deklarację Zgodności z wymaganiami Dyrektywy 93/42. Przeprowadzono procedurę nadania im znaku CE, oraz zostały wpisane do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

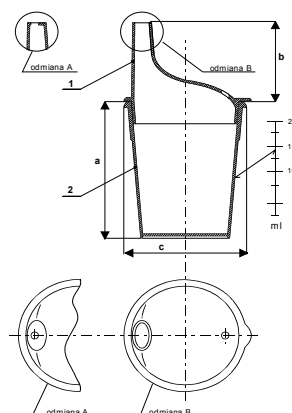

a= 95 mm(±3%) b= 49 mm(±3%) c= Ø71 mm(±3%)

poz.1- wieczko z ustnikiem, poz. 2- kubek

OPIS WYROBU

Nazwa: POJEMNIK DO DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU "TULIPAN" poj. 2-2,5L

Symbol: T

Materiał: polipropylen

Kolor: naturalny tworzywa

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym (karton): 2 sztuki, 10 sztuk.

Okres przydatności do użytku: 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na etykiecie


Wyroby posiadają Deklarację Zgodności z wymaganiami Dyrektywy 93/42. Przeprowadzono procedurę nadania im znaku CE, oraz zostały wpisane do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Uwaga!

- nie używać pękniętego wyrobu,
- stosować i przechowywać w temperaturze pokojowej,
- nie podgrzewać otwartym ogniem,
- myć popularnymi środkami myjącymi niezawierającymi substancji ściernych,
- dezynfekcję można przeprowadzać jednym ze środków przeznaczonych i stosowanych w placówkach służby zdrowia służących do dezynfekcji tego typu wyrobów,
- wyrób może być poddawany sterylizacji termicznej w atmosferze suchego powietrza o temp. 130 0 C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126 0 C



Wys. 180 mm, szer. 185 mm

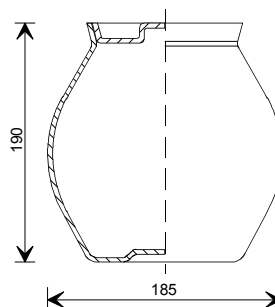

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PRZEZ ROWLAM