



Rodzina Narzędzi do  
Oczyszczania Ran  
Zimmer®  
Pulsavac®  
Plus



Najlepsze opcje do uzyskania maksymalnej kontroli





## Rodzina Pulsavac® Plus

Systemy oczyszczania ran Pulsavac® Plus, Pulsavac Plus LP i Pulsavac Plus AC oferują wszechstronne rozwiązania do przemywania ran, czyszczenia ran i leczenia. Trzy modele, charakteryzujące się niską wagą i sterowanymi spustem ustawieniami ciśnienia, zapewniają zarówno potężne działanie czyszczące kości, jak i delikatne płukanie tkanek miękkich. Jednocześnie działające ssanie i przepłukiwanie pomagają dokładnie usunąć odłamki i zanieczyszczenia bez zalewania pola operacyjnego. Pulsavac Plus i Pulsavac Plus AC są systemami, które stosuje się w przypadkach ortopedycznych i urazach. Pulsavac Plus LP zapewnia delikatne płukanie w celu oczyszczenia tkanek miękkich.



**Teksturowana Powierzchnia**

*blisko końcówki zapewnia pewny chwyt i stabilność, nawet w niewygodnych pozycjach.*

**Przełącznik Kołyskowy**

*Zapewnia dogodne kontrolowanie ciśnienia koniuszkami palców*

**Teksturowany Uchwyt w Kształcie Kolby Pistoletu**

*Zapewnia pewne i wygodne chwycenie, tak aby ułatwić panowanie nad narzędziem.*

**Siła w Twoich Rękach**

Systemy *Pulsavac Plus* i *Pulsavac Plus AC* są idealne do sali operacyjnej i zastosowań ortopedycznych. Wysoka moc pomaga skutecznie oczyścić kość i odpryski cementu podczas operacji stawów. Specjalne końcówki zostały zaprojektowane konkretnie do operacji kolana i biodra.

**Niezależne Przewody do Płynów i Ssania**

*Zapewniają jednocześnie dostarczanie i odsysanie płynu*



**Pulsavac Plus •**

Łączy w sobie wygodę i moc, co zapewnia sprawne i efektywne pulsacyjne nawadnianie i oczyszczanie. Zewnętrzny akumulator zwisa poza sterylnym polem, a wiele końcówek i ciśnienie kontrolowane spustem zapewnia albo intensywne czyszczenie, lub delikatne płukanie. Najważniejszym miejscem jego zastosowania jest sala operacyjna przeznaczona do operacji ortopedycznych. Pulsavac Plus działa na ośmiu bateriach AA.



**Zasilacz Sieciowy  
Wielokrotnego Użyciu**  
Eliminuje konieczność użycia  
baterii alkalicznych, zmniejszając  
tym samym ilość odpadów.

**Pulsavac Plus AC•**

Rozwiązanie przyjazne środowisku. Zasilacz wielokrotnego użyciu, Power Pack, należy zakupić oddzielnie. System ten eliminuje konieczność stosowania baterii alkalicznych.

**Pulsavac Plus LP•**

Ten niskociśnieniowy system zapewnia regulowane, delikatne płukanie w celu oczyszczenia rany i leczenia, i jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych zabiegów leczenia wirowym strumieniem wody. Można go stosować przede wszystkim w salach operacyjnych, gabinetach zabiegowych, przychodniach, domach opieki lub zakładach opieki długoterminowej. Postępowanie można prowadzić w pokoju lub w domu pacjenta.

**Tylko Niskociśnieniowa Końcówka Czyszcząca**

00-5150-186-Elastyczna Końcówka, dł. 10.5 cali



Końcówki czyszczące posiadają antyrozpryskową osłonkę w kształcie podwójnego stożka, która ma na celu ograniczyć rozpryski i pomóc w kontrolowaniu zagrożeń związanych z półprzezroczystą mgiełką.

Zakodowane kolorami kropki na lewej wskazówce wskazują zgodność systemu.



00-5150-175-00 Natryskiawacz nawiewowy o wysokiej wydajności z osłoną, dł. 12.7cm

00-5150-375-00 Bez osłony



00-5150-176-00 Natryskiawacz nawiewowy o wysokiej wydajności z filtrem



00-5150-195-00 Natryskiawacz natryskowy o wysokiej wydajności z osłoną, dł. 12.7cm

00-5150-395-00 Bez osłony



00-5150-065-00 Wysokiej wydajności szeroki, pojedynczy strumień, dł. 7.2cm



00-5150-181-00 Wysokiej wydajności z czterema otworami, 20.32cm x 1.27cm



00-5150-182-00 Wysokiej wydajności z rozpryskiem promienistym, 22.86cm x .89cm



00-5150-183-00 Wysokiej wydajności z rozpryskiem promienistym z końcówką szczotkową, 22.86cm x .89cm x 1.52cm



00-5150-184-00 Końcówka wysokiej wydajności do korekty biodra, dł. 23cm




00-5150-185-00 Wysokiej wydajności z czterema otworami, 30.48cm x 1.27cm



00-5150-187-00 Wysokiej wydajności końcówka szczotkowa do plateau kości udowej, dł. 7cm



00-5150-145-00 Wysokiej Wydajności z regulowaną długością z osłoną

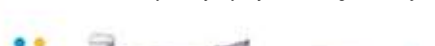

00-5150-155-00 Wysokiej wydajności pojedynczy strumień, z osłoną, dł. 12.7cm



# Informacja dla Zamawiającego

## Zestawy Pulsavac Plus (Futerał 10)

Numer Produktu	Opis
00-5150-420-00	Pulsavac Plus Zestaw Elementów
00-5150-475-00	Pulsavac Plus Zestaw Nawiewowy
00-5150-482-00	Pulsavac Plus Zestaw Biodrowy
00-5150-495-00	Pulsavac Plus Zestaw Natryskowy

## Zestawy Pulsavac Plus (Futerał 1)

Numer Produktu	Opis
00-5150-420-01	Pulsavac Plus Zestaw Elementów
00-5150-475-01	Pulsavac Plus Zestaw Nawiewowy
00-5150-482-01	Pulsavac Plus Zestaw Biodrowy
00-5150-495-01	Pulsavac Zestaw Natryskowy

## Zestawy Pulsavac Plus AC (Futerał 1)

Numer Produktu	Opis
00-5150-350-00	Pulsavac Plus AC Zasilacz (US)
00-5150-426-01	Pulsavac Plus AC Zestaw Elementów
00-5150-476-01	Pulsavac Plus AC Zestaw Rozprysku Nawiewowego
00-5150-486-01	Pulsavac Plus AC Zestaw Biodrowy
00-5150-496-01	Pulsavac Plus AC Zestaw Spreju Natryskowego

## Zestawy Pulsavac Plus LP (Futerał 10)

Numer Produktu	Opis
00-5150-920-00	Pulsavac Plus LP Zestaw Elementów
00-5150-975-00	Pulsavac Plus LP Zestaw Rozprysku Nawiewowego
00-5150-995-00	Pulsavac Plus LP Zestaw Rozprysku Natryskowego

## Końcówki Wielootworowe (Futerał 10)

Numer Produktu	Opis
00-5150-175-00	Wysokiej Wydajności Sprej Nawiewowy z Osloną, dł. 12.7cm
00-5150-176-00	Wysokiej Wydajności Natrysk Nawiewowy z filtrem
00-5150-195-00	Wysokiej Wydajności Natrysk Natryskowy z Osloną, dł. 12.7cm
00-5150-375-00	Wysokiej Wydajności Natrysk Nawiewowy bez Oslony, dł. 10cm I
00-5150-395-00	Wysokiej Wydajności Sprej Natryskowy bez Oslony, dł. 10cm

## Końcówki Czyszczące/Ssące (Futerał 10)

Numer Produktu	Opis
00-5150-155-00	Wysokiej Wydajności Końcówka z Pojedynczym Strumieniem z Osloną, dł. 12.7cm
00-5150-065-00	Duża końcówka z Otworem na Płyn z Szerokim, Pojedynczym Strumieniem, dł. 7.2cm

## Końcówki Udowe (Futerał 10)

Numer Produktu	Opis
00-5150-181-00	Wysokiej Wydajności Końcówka IM z Czterema Otworami, 20.32cm x 1.27cm
00-5150-182-00	Wysokiej Wydajności Końcówka IM z Rozpryskiem Promienistym, 22.86cm x .89cm
00-5150-183-00	Wysokiej Wydajności Końcówka Szczotkowa IM z Rozpryskiem Promienistym, 22.86cm x .89cm x 1.52cm
00-5150-184-00	Wysokiej Wydajności Końcówka IM do Korekty Biodra, 23cm length
00-5150-185-00	Wysokiej Wydajności Końcówka IM z Czterema Otworami, 30.48cm x 1.27cm
00-5150-187-00	Wysokiej Wydajności Końcówka Szczotkowa IM do Plateau Uda, dł. 7cm


## Końcówki Specjalistyczne (Futerał 10)

Numer Produktu	Opis
00-5150-145-00	Wysokiej Wydajności Końcówka o Regulowanej Długości z Osloną
00-5150-186-00	Końcówka Elastyczna, dł. 10.5 cali

## Różne (Futerał 10)

Numer Produktu	Opis
00-5150-188-00	Oslona 18cm
00-5150-189-00	Oslona 23cm

## Zasilacze (Wielokrotnego Użytku) (Futerał 1)

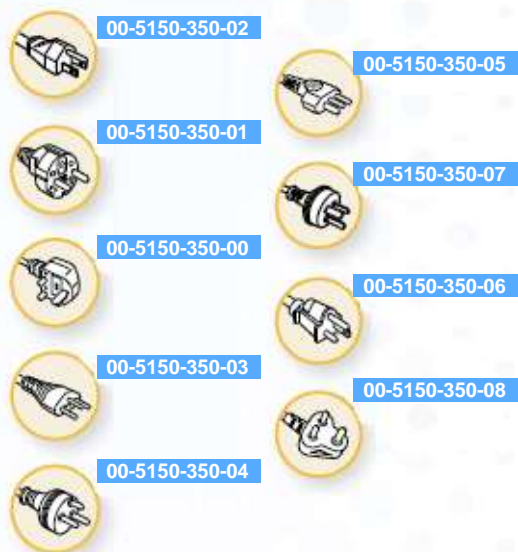

Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem firmy Zimmer lub odwiedź nas na [www.zimmer.com](http://www.zimmer.com)

